

医疗器械产品技术要求编号:

盆底肌肉康复器


1 产品型号/规格及其划分说明

由不同重量的康复器主体和尾部引线组成；康复器主体由高分子材料制成，或者由高分子材料和内置配重金属块组成；尾部引线为尼龙线或与康复器主体同样材料。按照产品材质和重量进行分类，型号/规格表示为 YYGY□-□□

其中，YY 代表本公司，GY 代表妇科类产品，□-□□的含义如表 1 所示。

表 1 产品型号/规格划分

材质/型号规格	PVC 材质+尼龙尾线	YYGY-A-(22)	YYGY-A-(34)	YYGY-A-(46)	YYGY-A-(58)	YYGY-A-(70)
材质/型号规格	硅胶材质+硅胶尾线	YYGY-B-(22)	YYGY-B-(34)	YYGY-B-(46)	YYGY-B-(58)	YYGY-B-(70)
重量		22g	34 g	46g	58 g	66 g
重量允差		±5g				
尾线长度		不短于 12.0cm				

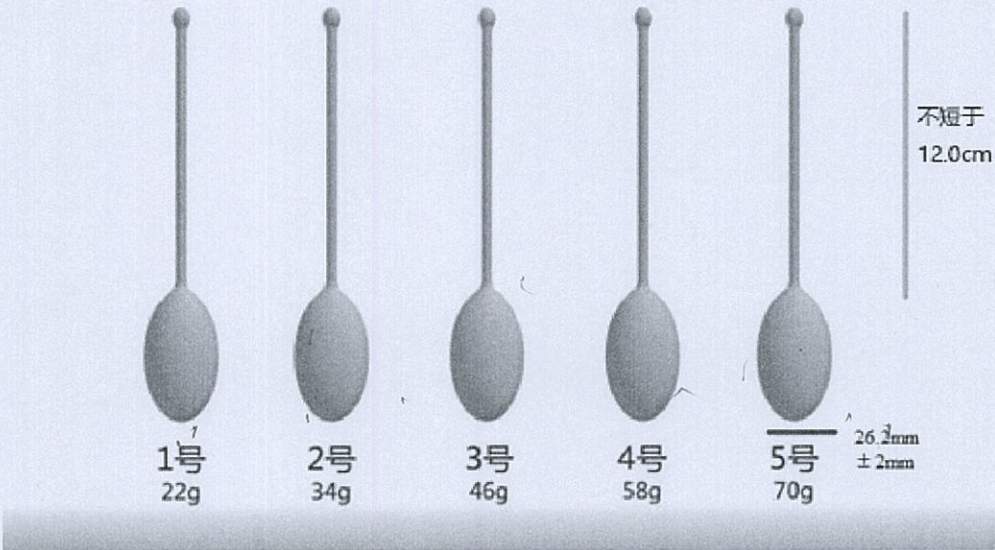

盆底肌肉康复示意图

2 性能指标

2.1 重量

重量及误差应符合表 1 的要求。

2.2 球体短径

球体短径应为 $26.2\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。

2.3 尾线长度

尾线长度应为不短于 12.0cm。

2.4 抗拉力

尾线与球体的连接应能承受 1000g 的静拉力而不断裂。

2.5 外观

表面应平整，无污渍。

2.6 外部标识

外部标识（如有）应清晰可见。



3 检验方法

3.1 重量

使用称重仪器进行测量，结果应符合要求。

3.2 球体短径

使用游标卡尺进行测量，结果应符合要求。

3.3 尾线长度

使用直尺或软尺进行测量，结果应符合要求。

3.4 抗拉力

下挂 1000g 的砝码或同等重量的物件，静候 5 秒钟，尾线与球体的连接应不断裂。

3.5 外观

目视检查，表面应平整，无污渍。

3.6 外部标识

目视检查，外部标识（如有）应清晰可见。

4. 术语

无

