


盆底功能 评估报告

姓名	林女士	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-04-21 16:08:36			总得分	33.41
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	6.49	2-4μV		
	变异性	0.17	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.66	< 0.5s		
	最大值	22.0	35-45μV		
	快速放松	0.56	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	13.73	30-40μV		
	变异性	0.23	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	11.25	25-35μV		
	变异性	0.28	< 0.2		
后静息阶段	平均值	6.9	2-4μV		
	变异性	0.16	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

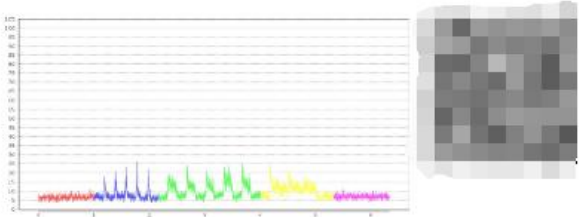

盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1. 前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程首次评估

盆底功能 评估报告

姓名	林女士	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-06-03 23:27:01			总得分	84.29
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	2.98	2-4μV		
	变异性	0.13	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.48	< 0.5s		
	最大值	35.0	35-45μV		
	快速放松	0.57	< 0.5s		
紧张收缩阶段	平均值	28.72	30-40μV		
	变异性	0.28	< 0.2		
耐力收缩阶段	平均值	23.89	25-35μV		
	变异性	0.23	< 0.2		
后静息阶段	平均值	2.52	2-4μV		
	变异性	0.2	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

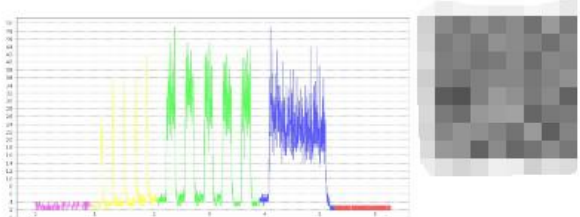

盆底肌肉表面肌电图

诊断:轻度松弛型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1. 前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

第一个疗程末次评估

基本情况:

产妇背景: 产妇林女士, 33岁, 顺产后 2 个月, 出现混合型尿失禁, 症状表现为尿急、打喷嚏漏尿, 改良牛津肌力分级: 1级。

康复方案: 制定个性化方案, 使用居家生物反馈设备进行康复治疗, 每三次治疗后进行 1 次远程康复指导。前期制定压力性尿失禁方案, 配合腹式呼吸训练, 后期结合评估情况及最新康复感受, 动态调整方案。鼓励患者增强信心, 继续规律锻炼。及时跟进训练情况, 指导康复注意事项, 确保康复效率。

康复疗效: 经过2个月居家康复, 林女士反馈尿急、打喷嚏漏尿症状明显改善, 复查肌力提升至 2 级+, 表示居家康复疗效明显, 再续租一疗程。

患者院内面诊及检查情况：

改良牛津肌力分级：1级（检查者的手指感觉到颤动或搏动——非常弱的收缩）

个人情况：产后2个月，孕3产2，顺产【撕裂】，漏尿【偶尔】

盆底B超：子宫内膜回声欠均匀，宫腔内强回声斑，建议复查 双侧卵巢未见明显异常

盆底超声检查提示：前腔室：膀胱膨出。中腔室：子宫脱垂声像。后腔室：直肠膨出声像。未见肛提肌及肛门括约肌断裂声像。肛提肌裂孔扩张。

第一疗程方案详情:

治疗前期（1-3次）：处方一：压力性尿失禁 15分钟；处方二：压力性尿失禁 5μv 15分钟。

治疗中期（4-8次）：处方一：急迫性尿失禁 15分钟；处方二：急迫性尿失禁 5μv 15分钟。

治疗后期（9-10次）：处方一：压力性尿失禁 5μv 15分钟；处方二：凯格尔慢肌 10μv 15分钟。

序号	处方一	处方一时长	处方二	处方二时长	处方三	处方三时长	处方四	处方四时长	完成时间
1	压力性尿失禁	15	压力性尿失禁 5μv	15					2025-04-22 14:32:01
2	压力性尿失禁	15	压力性尿失禁 5μv	15					2025-04-25 13:26:18
3	压力性尿失禁	15	压力性尿失禁 5μv	15					2025-04-27 12:35:32
4	急迫性尿失禁	15	急迫性尿失禁 5μv	15					2025-05-06 23:18:30
5	急迫性尿失禁	15	急迫性尿失禁 5μv	15					2025-05-08 14:17:09
6	急迫性尿失禁	15	急迫性尿失禁 5μv	15					2025-05-12 13:47:24
7	急迫性尿失禁 5μv	15	凯格尔慢肌 10μv	15					2025-05-15 13:53:25
8	急迫性尿失禁 5μv	15	凯格尔慢肌 10μv	15					2025-05-17 15:20:47
9	压力性尿失禁 5μv	15	凯格尔慢肌 10μv	15					2025-05-28 14:05:07
10	压力性尿失禁 5μv	15	凯格尔慢肌 10μv	15					2025-06-03 23:59:56

治疗前期（1-3次）方案设置：

1.评估报告显示：评估前后静息值稍高，变异性在正常范围。盆底肌收缩力弱，盆底肌松弛。盆底肌收缩状态下稳定性差，控制能力差。

2.患者感受反馈：患者主述没有盆底区域疼痛、性交痛情况。产后2个月，顺产有撕裂伤。漏尿在咳嗽打喷嚏情况下发生，压力性尿失禁。

3.方案设置：神经肌肉电刺激15分钟+肌电触发电刺激15分钟。治疗压力性尿失禁。辅以腹式呼吸运动放松盆底肌肉。

4月22日 13:16

@简 亲，请问您偶尔漏尿通常发生在以下哪种情况？是咳嗽或打喷嚏漏尿，还是会尿频尿急，突然憋不住


@微信

咳嗽喷嚏

盆底功能 评估报告

姓名	林晓	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-04-21 16:08:36	总得分	33.41		
阶段	指标	阶段测试值	参考值		
前静息阶段	平均值	6.49	2-4μV		
	变异性	0.17	< 0.2		
快速收缩阶段	快速收缩	0.66	< 0.5s		
	最大值	22.0	35-45μV		
紧张收缩阶段	快速放松	0.56	< 0.5s		
	平均值	13.73	30-40μV		
耐力收缩阶段	变异性	0.23	< 0.2		
	平均值	11.25	25-35μV		
后静息阶段	变异性	0.28	< 0.2		
	平均值	6.9	2-4μV		
	变异性	0.16	< 0.2		

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

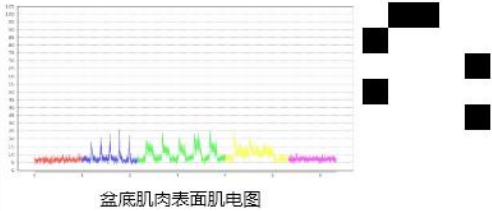

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。

4月22日 13:29

@简 亲，治疗方案已制定，今天可以开始盆底康复训练啦

处方1：压力性尿失禁 15分钟，这是纯电刺激模块，您放松治疗就可以

处方2：压力性尿失禁 5μv 15分钟，这是主动训练方案，肌力达到阈值才会感觉到电刺激，请您根据语音提示进行收缩和放松

温馨提示：
1.仪器治疗需要间隔 1 天进行；
2.设备电流是1-100可以调节，请您根据治疗当天感觉调整，舒适即可；
3.第 4 次治疗前进行一次评估，先不训练，看方案是否需要调整，我们再提醒您继续。

另外，除设备辅助治疗外，日常可以自行练习腹式呼吸哦，可以帮助放松锻炼后的盆底肌！

智慧家康服务

汕头医科大学附属第一医院产科

快速开始使用指南

阴道缩紧指导视频

盆底肌训练

3d腹肌基础训练

3d腹肌强化训练

5d腹肌基础训练

小程序

客服耀耀：

【腹式呼吸】训练方法：
1.身体静躺（也可静坐），将一只手放在腹部，想象身体完全处于放松状态，可以先完全放松5分钟，心里默念“肩膀松~肚子松~全身都松~”；

治疗前期（4-8次）方案设置：

- 1.评估报告显示：评估后静息值稍高，变异性超出正常范围。盆底肌肌力有所提升。盆底肌收缩状态下稳定性差，控制能力差。
- 2.患者康复反馈：患者反馈尿急，急迫性尿失禁。
- 3.方案设置：4-6次神经肌肉电刺激15分钟+肌电触发电刺激15分钟。治疗急迫性尿失禁。辅以腹式呼吸练习和凯格尔自主锻炼。7-8次肌电触发电刺激15分钟+凯格尔慢肌模块15分钟。

盆底功能 评估报告

姓名	林某	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-05-06 22:47:46			总得分	77.59

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.13	2-4μV
	变异性	0.18	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.52	< 0.5s
	最大值	41.4	35-45μV
紧张收缩阶段	快速放松	0.66	< 0.5s
	平均值	29.73	30-40μV
耐力收缩阶段	变异性	0.26	< 0.2
	平均值	27.29	25-35μV
后静息阶段	变异性	7.99	2-4μV
	变异性	0.27	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读需说明:
1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态,大于4μV且变异性系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

5月6日 9:51

@微信

你好,帮忙看一下方案是否需要调整

亲早上好,请问您康复以来有没有什么新情况呢,还会出现偶尔漏尿吗

5月6日 10:00

@微信

好像尿急,没咳嗽打喷嚏不知道漏不漏尿

好的亲,这边来反馈一下您的情况

5月6日 14:18

@微信

好的

5月6日 14:18

亲您好,请您在智慧家康App首页下拉刷新一下页面,今天可以继续治疗啦

温馨提示:今天治疗前可以先进行一次评估哈,然后接着进入治疗

评估需要在治疗前进行

以便更好了解盆底肌状态

好像尿急,没咳嗽打喷嚏不知道漏不漏尿

接下来的方案可以帮助改善尿频尿急情况

5月7日 17:30

亲您好,根据您昨晚评估报告显示,您的肌力还可以,稳定性需要提升

智慧家康服务
汕头医科大学附属第一医院产科

阴道磁转使用指南
阴道磁转指导视频
阶段性训练
3s慢肌基础训练
3s慢肌强化训练
5s慢肌基础训练

小程序

客服耀耀:
汕头医科大学附属第一医院 产科

除仪器治疗外,您可以在小程序自主练习【阶段性训练】,每天一个动作,2-3次,连续3天换下一个动作,循序渐进

5月7日 17:56

@微信

好的哈

加油

您可以尝试在做凯格尔时,想象一下,您正在轻轻地提起和放松盆底肌肉,保持持续性和规律性,尽量维持收缩保持的稳定,每一次收缩结束后尽量的放松,然后再进行下一次的阴道收缩动作,逐渐增强盆底肌肉的力量和耐力

@微信


好的

盆底功能 评估报告

姓名	林	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-05-12 13:54:48			总得分	81.23

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	4.41	2-4μV
	变异性	0.28	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.34	< 0.5s
	最大值	32.6	35-45μV
	快速放松	0.7	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	27.53	30-40μV
	变异性	0.26	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	27.19	25-35μV
	变异性	0.2	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.82	2-4μV
	变异性	0.17	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

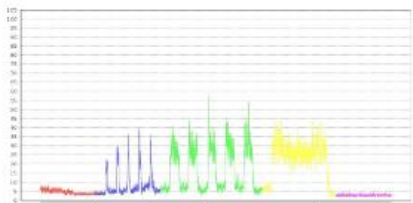

盆底肌肉表面肌电图

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:


1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

盆底功能 评估报告

姓名	林	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-05-15 13:22:53			总得分	85.67

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.43	2-4μV
	变异性	0.21	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.64	< 0.5s
	最大值	38.2	35-45μV
	快速放松	0.83	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	30.73	30-40μV
	变异性	0.28	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	28.3	25-35μV
	变异性	0.21	< 0.2
后静息阶段	平均值	2.99	2-4μV
	变异性	0.19	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

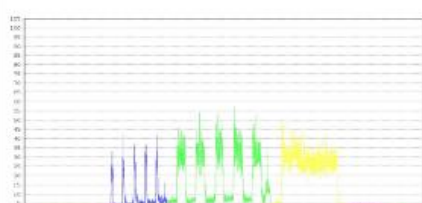

盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段:测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值,提示可能存在肌肉过度活跃。

5月14日 13:08



@微信

你好, 看看方案是否需要调整

好像尿急, 没咳嗽打喷嚏不知道漏不漏尿

亲您好, 请问您最近还会出现以上情况吗

@微信

偶尔会尿急, 还是没咳嗽不知道会不会

好的亲, 这边来反馈一下哈, 有进度会及时回复您

5月14日 14:29

@简 亲您好, 方案已调整, 请您下拉App首页刷新, 方案中增加了凯格尔慢肌 10μv, 该方案不放电, 请您根据语音提示, 进行收缩放松动作, 尽量与曲线保持一致

客服耀耀:
除仪器治疗外, 您可以在小程序自主练习【阶段性训练】, 每天...

仪器治疗当天, 可以缩短自主锻炼时间

治疗前期（9-10次）方案设置：

1.评估报告显示：基线恢复接近正常。盆底肌肌力明显提升。盆底肌收缩状态下稳定性和控制能力增强。

2.患者康复反馈：患者反馈打喷嚏漏尿。

3.方案设置：肌电触发电刺激15分钟+凯格尔慢肌模块15分钟。治疗压力性尿失禁。辅以腹式呼吸练习和凯格尔自主锻炼。

盆底功能 评估报告

姓名	1	性别	女	年龄	33
评估时间	2025-05-17 15:27:22			总得分	86.02

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.27	2-4μV
	变异性	0.22	< 0.2
快速收缩阶段	快速收缩	0.51	< 0.5s
	最大值	43.4	35-45μV
	快速放松	0.66	< 0.5s
紧张收缩阶段	平均值	34.37	30-40μV
	变异性	0.28	< 0.2
耐力收缩阶段	平均值	31.11	25-35μV
	变异性	0.22	< 0.2
后静息阶段	平均值	3.11	2-4μV
	变异性	0.16	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

盆底肌肉表面肌电图

诊断:正常
意见:
检查医生:

报告解读简要说明:
1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

5月17日 15:28

@微信

你好，打喷嚏还漏尿哦

@微信

你好，打喷嚏还漏尿哦

尿急就好些了

@微信

麻烦看一下方案是否需要调整

收到亲，这边来反馈一下，后续会提醒您继续治疗

@微信

好的

你好，打喷嚏还漏尿哦

亲，您在打喷嚏或咳嗽时可以提前收紧阴道，再做类似的动作会减少对盆底肌的损伤

好

简：

简，隔天再进行一次评估哈，先不接着治疗，看方案是否需要调整方案

后台看您是治疗后评估的，治疗后的肌肉比较活跃，会影响评估的准确性


客服耀耀：
汕头医科大学附属第一医院
产科

除仪器治疗外，继续【阶段性训练】，每天一个动作，2-3次，连续3天换下一个动作，注意保持肌力的稳定

患者回院复查：改良牛津肌力分级
治疗前是1级，康复锻炼后复查是2
级+，患者意愿续租。

盆底功能 评估报告					
姓名	██████████	性别	女	年龄	33
评估时间	2023-05-19 16:42:28			总得分	80.03
阶段	指标		阶段测试值	参考值	
前静息阶段	平均值		4.62	2-4μV	
	变异性		0.17	< 0.2	
快速收缩阶段	快速收缩		0.48	< 0.5s	
	最大值		44.8	35-45μV	
	快速放松		0.57	< 0.5s	
紧张收缩阶段	平均值		33.67	30-40μV	
	变异性		0.23	< 0.2	
耐力收缩阶段	平均值		30.93	25-35μV	
	变异性		0.19	< 0.2	
后静息阶段	平均值		6.02	2-4μV	
	变异性		0.17	< 0.2	

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

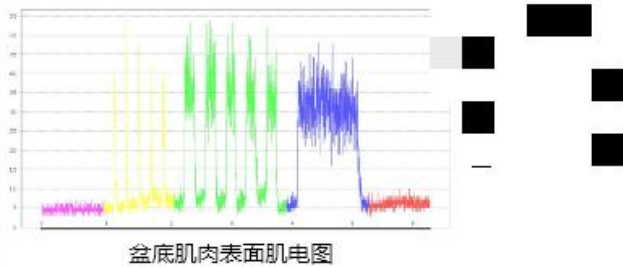

诊断:过度活动型

意见:

检查医生:

报告解读简要说明:

1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。

星期三 15:30

前几天有复查了, 医生说肌力2级+还达不到3级

亲下午好, 针对您目前的康复情况, 想和您详细沟通下一步的治疗建议。

- 1.您已完成一个疗程治疗, 尿急症状有所改善, 但打喷嚏时仍存在漏尿情况。经评估, 您的盆底肌力基础较弱, 存在膨出及脱垂, 目前尚未达到最佳康复状态。
- 2.建议您继续仪器治疗, 进一步强化盆底肌力, 稳定肌肉状态, 防止症状反复或退化。如果依靠自主锻炼(如凯格尔运动), 康复时间可能会比较长。
- 3.仪器治疗可以结合专项方案, 能更好地帮您改善漏尿及脱垂情况。

为了您的健康及康复效果, 建议您续租一个疗程, 我们会全程陪伴您康复, 您看是否想要续租呢?

星期三 15:59

@微信

好的, 那续租