

缺血预适应训练仪使用流程

注意：首次操作需依次完成步骤一、二、三，后续操作可直接从步骤四开始。

一、连接网络


1、开机：轻轻按下电源开关(约3秒左右)，仪器开机



2、选择用户，进入网络连接



3、搜索WiFi账号-输入密码-无线连接

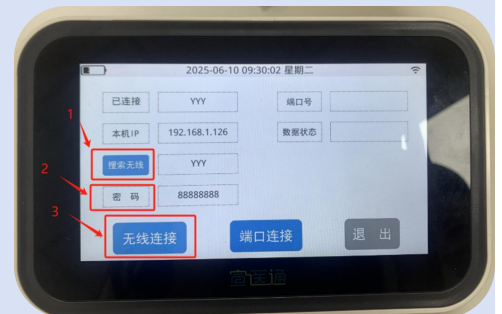


二、填写用户信息

1、个人中心



2、填写每一栏信息后返回首页

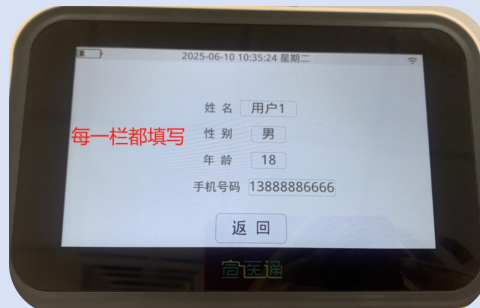

三、智慧家康APP扫描登记设备


1、手机应用商城搜索“智慧家康”后下载安装



2、登录APP后，首页右上角点击扫一扫



3、扫描设备编码二维码进行设备登记

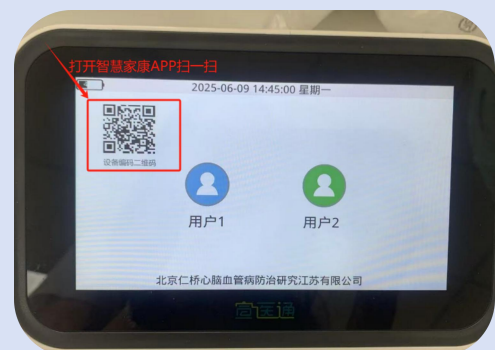

四、佩戴臂带

1、脱去较厚的衣服将臂带分别缠于左右上臂的上段，尽可能靠近腋下臂带气路管应位于前臂内侧



2、将臂带插头分别插到训练仪左右两侧对应的插孔里



五、开始训练


1、选择用户，开始做训练



2、选择“智能/阶梯/测试模式”图标，等待几秒钟后开始血压测量，6秒后仪器根据基础血压数据自动启动个性化的训练程序，开始训练



3、以上三种模式训练过程中如身体不适，可轻触屏幕上“一键停止”或按电源开关停止训练

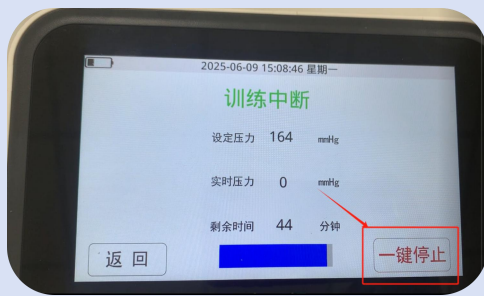


六、查看训练记录

(1) 在设备查看数据


1、个人中心



3、血压/心率记录

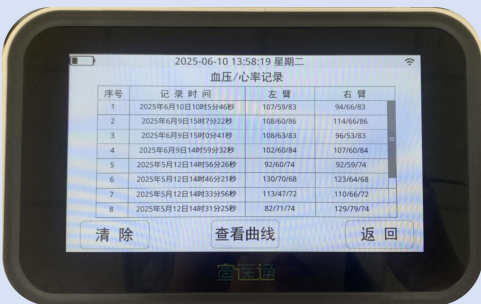

4、训练记录

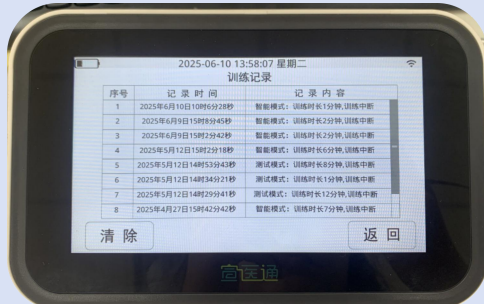

(2) 2h后APP查看数据

1、在智慧家康APP查看训练记录



2、测试数据



3、训练数据

