



圆爱康系列产品



智慧家康

让健康更简单一点！

盆底康复系统 生物反馈电刺激治疗仪 ESA---S01



01 治疗设备 ESA-S01

02 院内院外康复协同解决方案

03 公司介绍

广州圆爱康生物科技有限公司





01

治疗系统和设备





Biological feedback electrical stimulation therapy device ESA-S01

四机协同版

单人综合治疗项目：

腹直肌综合治疗项目、

腰背痛综合治疗项目：

双人乳腺等多通道项目同步治疗等、

腹直肌综合治疗、

腹直肌分离治疗、

腹横肌治疗、

腹斜肌治疗同步进行，

同一时间段单人多项目同时进行，省时效果好

同一时段，评估治疗同步进行，效率高



蓝牙传输 简单快捷

传输更稳定、连接更简便、轻松做盆底肌训练



与院内设备相同疗效、相同技术原理

>>> 院内台车设备 - 生物反馈电刺激治疗仪 ESA-S01

使用效果一目了然

用户使用报告


使用前

使用后

盆底肌肉功能评估报告

姓名:	性别:	女	年龄:	18	检查号:	1
测试日期:	2019-01-16	分次类型:	(n=1)	分次日期:	(n=1)	
阶段	指标	测试值	参考值			
前静息阶段	平均值	5.29	2-4 μ V			
	变异系数	0.71	<0.2			
	快速收缩时间	0.20	<0.5s			
快肌 (I类肌) 测试阶段	最大值	59.20	35-45 μ V			
	快速放松时间	0.20	<0.5s			
	平均值	13.64	10-40 μ V			
慢肌 (II类肌) 测试阶段	变异系数	0.37	<0.2			
	平均值	17.15	25-35 μ V			
	耐力测试	0.55	<0.2			
后静息阶段	后 10 秒/前 10 秒比值	3.12	0.8-1.0			
	平均值	3.43	2-4 μ V			
	变异系数	0.24	<0.2			

盆底肌肉表面肌电图

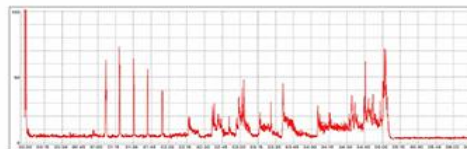


报告解读简要说明:

1. 前静息阶段: 测试肌肉放松能力, 平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿潴留、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。
2. 快肌 (I类肌) 测试阶段: 测试快肌肌力和反应速度, 肌力不足可引起压力性尿失禁、性高潮障碍、丧失等症。
3. 慢肌 (II类肌) 测试阶段: 测试慢肌肌力和收缩稳定性, 肌力不足以及稳定性差可引起器官脱出或脱垂、阴道松弛、性冷淡、反复泌尿生殖道感染等。
4. 耐力测试阶段: 测试慢肌的耐力, 均值和后10秒/前10秒比值的降低, 反映慢肌的耐力较差, 易疲劳, 可引起盆腔疼痛、阴道松弛等症状。
5. 后静息阶段: 测试肌肉收缩后放松能力, 平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿潴留、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。

盆底肌肉功能评估报告

姓名:	性别:	女	年龄:	18	检查号:	1
测试日期:	2019-01-26	分次类型:	(n=1)	分次日期:	(n=1)	
阶段	指标	测试值	参考值			
前静息阶段	平均值	3.02	2-4 μ V			
	变异系数	0.11	<0.2			
	快速收缩时间	0.21	<0.5s			
快肌 (I类肌) 测试阶段	最大值	47.00	35-45 μ V			
	快速放松时间	0.20	<0.5s			
	平均值	37.36	30-40 μ V			
慢肌 (II类肌) 测试阶段	变异系数	0.33	<0.2			
	平均值	37.52	25-35 μ V			
	耐力测试	0.30	<0.2			
后静息阶段	后 10 秒/前 10 秒比值	1.59	0.8-1.0			
	平均值	5.71	2-4 μ V			
	变异系数	0.16	<0.2			

盆底肌肉表面肌电图

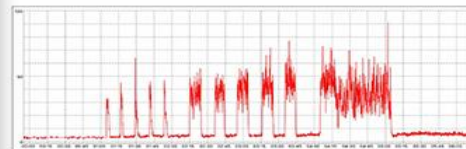

报告解读简要说明:

1. 前静息阶段: 测试肌肉放松能力, 平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿潴留、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。
2. 快肌 (I类肌) 测试阶段: 测试快肌肌力和反应速度, 肌力不足可引起压力性尿失禁、性高潮障碍、丧失等症。
3. 慢肌 (II类肌) 测试阶段: 测试慢肌肌力和收缩稳定性, 肌力不足以及稳定性差可引起器官脱出或脱垂、阴道松弛、性冷淡、反复泌尿生殖道感染等。
4. 耐力测试阶段: 测试慢肌的耐力, 均值和后10秒/前10秒比值的降低, 反映慢肌的耐力较差, 易疲劳, 可引起盆腔疼痛、阴道松弛等症状。
5. 后静息阶段: 测试肌肉收缩后放松能力, 平均值大于4 μ V, 提示肌肉可能存在过度活动, 可引起盆底肌肉缺血缺氧, 导致性交疼痛、尿潴留、膀胱痛、外阴痛、便秘等症状。

国际标准的表面肌电评估

- 采用国际标准的表面肌电评估方法
- 评估盆底肌肉功能状态
- 有正常人对照值,
- 采集精准1 μ V

与院内设备相同疗效、相同技术原理

01

神经肌肉电刺激

被动训练

通过脉冲电流刺激特定肌肉群，以达到“功能”修复的目的。

神经肌肉电刺激可用于治疗多种疾病，包括神经损伤、肌肉疾患、关节炎和疼痛等。

主被动训练

在患者完成动作的过程中，达到事先设定的阈值，设备给予电刺激辅助患者完成动作，让不断重复的运动模式信息，传入中枢神经系统，逐渐恢复原有的功能。

肌电触发电刺激

02

03

Kegel模板训练

主动模版训练

根据设备给予的模版，在语音提示下通过自主的、反复的盆底肌肉群收缩和舒张，增强盆底肌张力、恢复松弛的盆底肌。

通过采集到的盆底肌表面肌电信号为动作，进行多媒体游戏。

多媒体生物反馈训练

04




盆底康复系统-生物反馈电刺激治疗仪ESA-S01 耗材

Biological feedback electrical stimulation therapy device ESA-S01


◎ 独立注册证 ◎ 高强度防水 ◎ 人体工学设计 ◎ 生物兼容性设计




圆型电极片

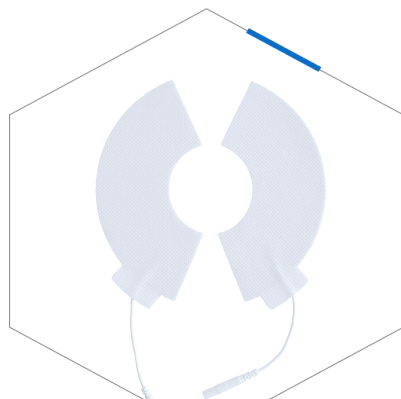

乳型电极片

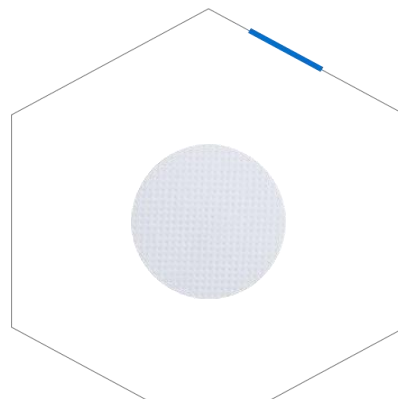


吞咽电极片

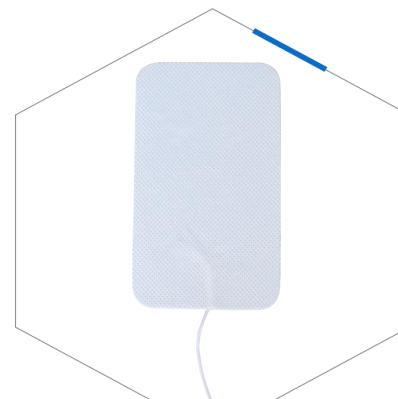


长方形型电极片



方形电极片

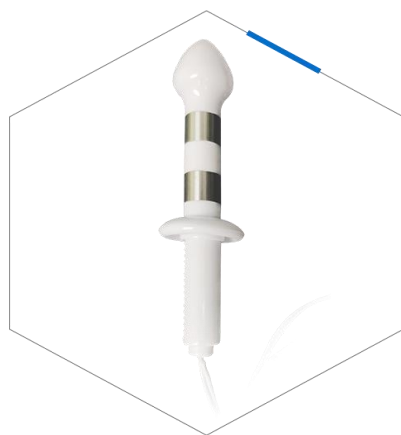

直肠电极

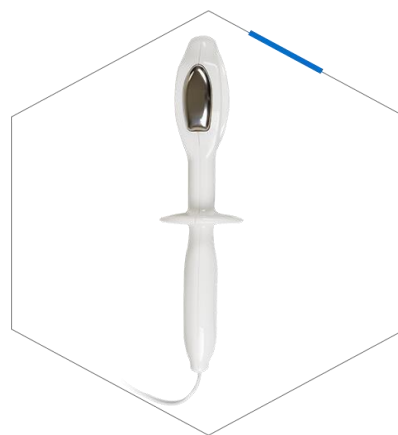

一次性阴道电极



多次性阴道电极

Obstetrical Department

产科

腰背痛综合治疗

产后宫缩痛

产后康复

产后水肿

产后康复套餐

腹直肌分离

子宫复旧

耻骨联合分离

产后子宫复旧

坐骨神经痛

泌乳

肩颈痛治疗

镇痛

肌肉酸痛

乳腺疏通

静脉曲张

Gynecology/Rehabilitation/Gynecology

妇科/康复科/妇保科

盆底康复

肩颈痛治疗

腹直肌分离

肌肉酸痛

痛经治疗

静脉曲张

腰背痛综合治疗

慢性盆腔炎

坐骨神经痛

术后康复

After abortion plan

人流术后

人流术后镇痛

人流术后子宫复旧

人流术后子宫内膜恢复

人流术后卵巢恢复

人流术后月经过少

多科室、多项目可用

Reproductive
Center/Eugenics and
Fertility Treatment

生殖中心/优生优育治疗

子宫壁增厚治疗

促进子宫内膜血供

促进卵巢血供

卵巢低反应

卵巢储备功能下降

Postoperative rehabilitation
treatment in general
surgery/rehabilitation department

普外科术后康复治疗/康复科

术后尿潴留治疗

术后疼痛治疗

术后排气

胃肠排气

吞咽困难治疗

肌肉萎缩治疗

Urology/Proctology/Gas
trointestinal Surgery

泌尿科/肛肠科/胃肠外科

尿潴留康复

泌尿科盆底康复

(男科) 直肠康复

胃肠排气

便秘

大便失禁

Community Rehabilitation/Community
Postoperative Rehabilitation Treatment

社区康复/社区术后康复治疗

吞咽困难治疗

肌肉萎缩治疗

多科室、多项目可用


02

院内院外康复协同 解决方案

基于医院就诊、诊断流程中，通过技术手段拓展康复渠道



>>> 解决方案 - 在医院为患者提供多治疗模式选择

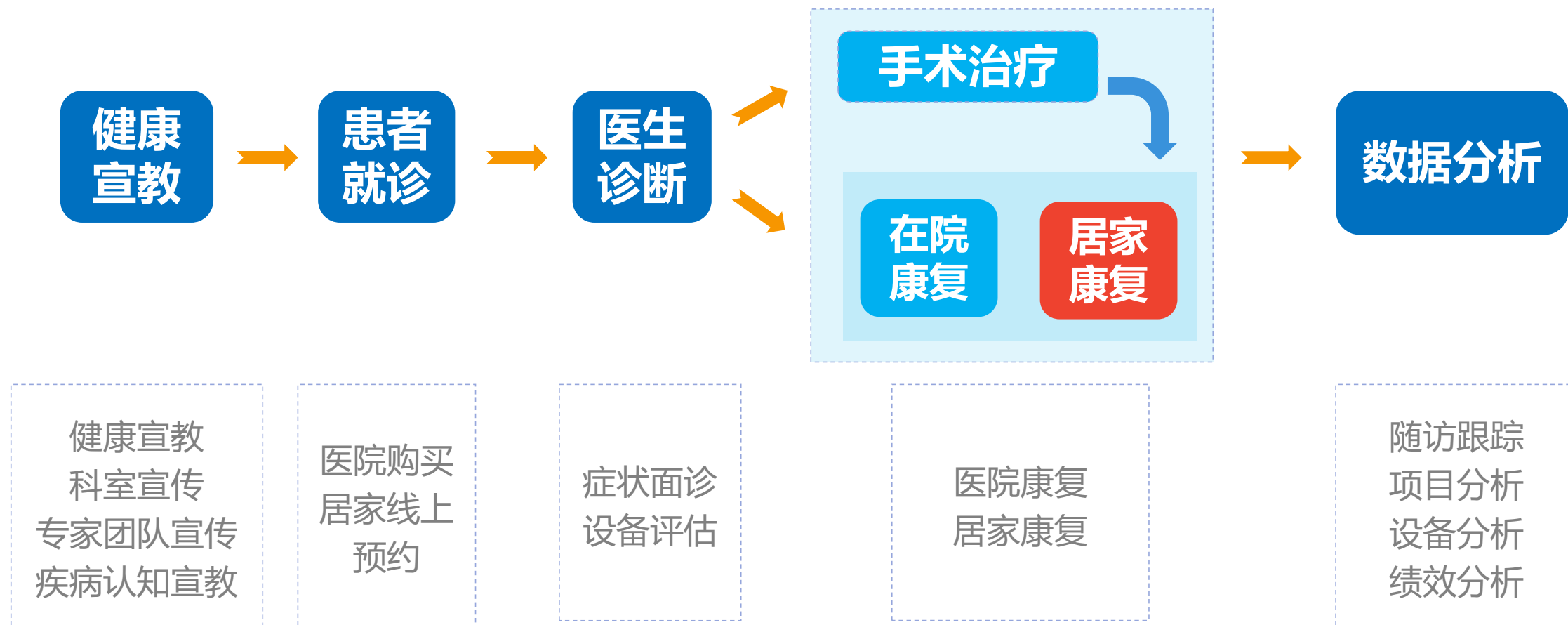

院内整体评估，医护远程指导，个性化居家康复

>>> 打造盆底治疗医院康复与家庭康复一体化

院内整体评估 康复治疗



生物反馈电刺激治疗仪 ESA-S01

个性化治疗方案制定



医护管理端



创新“六师共管”服务体系



遵医嘱居家治疗



生物反馈电刺激治疗仪



患者治疗端APP

“六师共管” 患者跟踪管理服务体系



为每位患者提供“六师共管”服务
帮助患者在健康管理周期内更好地完成健康管理的目标。

>>> 两大核心能力：能力二

对接物联网设备—医生通过设备数据监测病程及时调整健康管理和治疗方案



医院

医院治疗

院内医护服务+

院内评估/治疗设备

以数智化技术，打破时空限制



在线服务

医嘱计划

评估与治疗

居家

家庭监测治疗



远程医护服务+

居家治疗/监测设备

提升医疗服务效率和可及性

以患者为中心，提供成本更低、更便利、智能化的个性化治疗方式



03 公司介绍





公司介绍

Company Profile

广州圆爱康生物科技有限公司于2018年成立, 是居家康复协同服务制造厂家, 历时7年技术的打磨, 得到广东省中科院技术认证, 通过布局APP、PC管理端、小程序、微信公众号、手机管理端等一系列的互联网矩阵, 成功的搭建起一套让专科可以科学、高效运营, 医护团队管理千家万户的“互联网+医疗健康患者服务管理体系”, 包含了居家康复服务支撑平台、院内专科运营管理系统、院内外协同治疗服务系统、物联网+可穿戴居家设备(盆底/产后康复设备), 四位一体, 为医院提供更高效的管理和服务, 让更多的患者得到更专业的医疗服务。

同时打造to B-to C医疗服务支撑体系, 提供专科设备协同、智能管理、数据同步等服务, 为医院提供了一整套的医患时时互动管理、个性化治疗方案设定、治疗数据同步, 同时为患者建立“六师共管”的服务体系, 真正做到提供专业医疗支撑下有效的患者居家康复服务。

“

公司平台:
搭建医院康复到居家康复的桥梁,
打造疾病康复管理新方式!

”

“

公司愿景:
让专业医疗真正参与到居家康复
中来

”



我们用心呵护你的健康。

